



# Softly®

## Mezclador de Amalgama en cápsulas predosificadas



Precisión del tiempo  
seleccionado



Desactivado cuando la tapa  
se abre




Homogeneidad y  
consistencia ideal  
para todo tipo de  
amalgama

# Softly®

**SOFTLY** es un vibrador de cápsulas predefinidas de alta velocidad.

Está controlado por un microprocesador, que asegura la precisión y la repetibilidad del tiempo seleccionado y le asegura así, una mezcla consistente. La estética y la ergonomía del **SOFTLY** facilita la utilización y la programación del tiempo en el display. La amplitud de movimientos (25 mm.), y la frecuencia del mezclador (4000 rpm  $\pm$  50 por minuto) así como la correcta elección del tiempo, nos garantiza la perfecta homogeneidad y consistencia ideal para todo tipo de amalgamas.

El **SOFTLY** es muy estable, extremadamente silencioso y muy fácil de limpiar y de mantener. Para tener una absoluta seguridad, el **SOFTLY** se detiene automáticamente al abrir la tapa de acceso a las cápsulas. El **SOFTLY** está enteramente moldeado con una inyección de materiales ABS. Es compatible con todos los sistemas estándar de seguridad eléctrica y mecánica. Su forma, su sistema de control gestionado por microprocesador y sus características de seguridad, lo convierten en un aparato de fácil utilización.

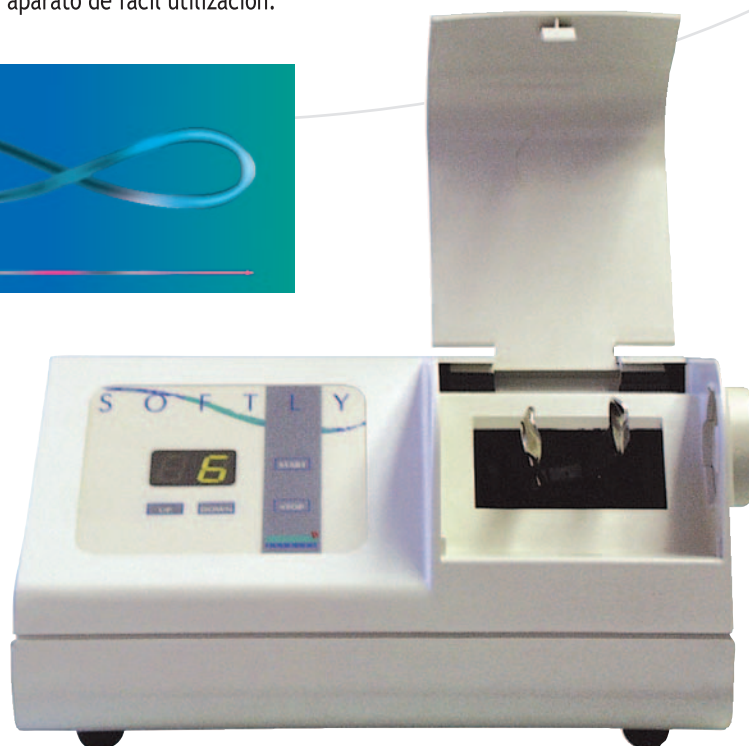

## Características Técnicas

Voltaje nominal:..... 230 V/50 Hz - 110 V/60 Hz (opcional)  
Potencia absorbida:..... 50 W  
Fusible:..... 500 mA F (230 V) - 1 AF (110 V)  
Interruptor bipolar con indicador luminoso verde  
Frecuencia de mezcla:..... 4000 rpm  
Amplitud de vibración:..... 25 mm.  
Funcionamiento:..... intermitente  
Tiempo de mezcla programable:..... 0 - 30 seg.  
Dimensiones:..... 210 x 205 x 120 mm  
Peso:..... 3,1 Kg

## Ventajas

- Frecuencia de mezcla
- Funcionamiento silencioso
- Estable
- Total seguridad eléctrica
- Forma ergonómica
- Sin mantenimiento
- Limpiado fácil

*Fabricado conforme con las Normativas vigentes:  
CE - 93/42/CEE.*

