



**X•Developer®**

---

Reveladora Automática

# X•Developer®

## Procesadora Automática de Películas Radiográficas Dentales

### EXCELENTE CALIDAD RADIOGRAFICA:


El control automático de la temperatura de los líquidos y un rápido revelado, aseguran un inmejorable resultado.

**Minimiza los tiempos con lo que contribuye a un mejor funcionamiento de la clínica:** Películas archivables reveladas y secadas en 4 1/2 minutos, películas no archivables en 1 minuto.

### OPTIMA PRODUCTIVIDAD:

El sistema de transporte elimina la posibilidad de pérdida de las películas. Los componentes están fabricados en acero inoxidable para evitar cualquier posible corrosión.

**Mantenimiento sencillo y rápido:** Los bloques de rodillos y cubetas pueden desmontarse con gran facilidad para su limpieza y mantenimiento.

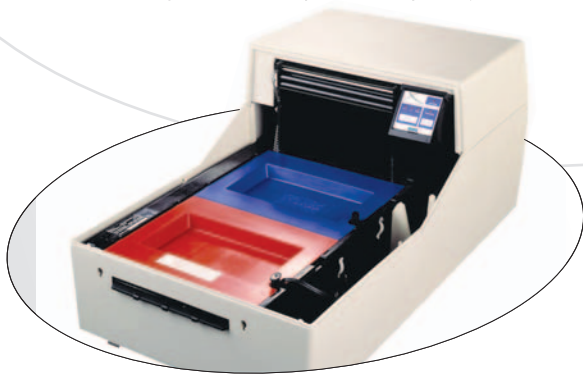

Tanques de revelado y fijador protegidos por cubetas anti-evaporación



Dos bloques de rodillos de fácil extracción para su limpieza



Set químico revelador + fijador



Cámara oscura opcional

### Características Técnicas

Tiempo de revelado:.....	Películas archivables en 4,5 min., películas no archivables (ENDO) 1 min. para revelado urgente durante el precalentamiento: 6 min.
Medidas películas:.....	Máximo 24 x 18
Químicos:.....	Revelador y fijador EXCEL listo para su uso
Fontanería:.....	Conexión de la red de agua y desagüe provisto de sifón
Dimensiones:.....	Ancho 435 mm., largo 765 mm., alto 330 mm. Cámara oscura: 450 mm. x 295 mm. x 350 mm.
Peso:.....	38 Kg. sin embalaje
Tensión:.....	220 - 230 V / 50 - 60 Hz., 3,5 A
Capacidad:.....	Revelador 2,37 l., fijador 2,37 l.

### Opciones

Cámara oscura

*Fabricado conforme con las Normativas vigentes:  
CE - 93/42/CEE.*

