



LABORATORIO

BEGO 2009

Aleaciones	•	2
Revestimiento	•	5
Duplicado	•	8
Arenas	•	10
Modelado	•	10
Alambres y soldaduras	•	16
Varios	•	18
Maquinaria	•	21
Bego Medical	•	28



Aleaciones · Prótesis removable

Wironit

La aleación clásica de colado sobre modelos para prótesis con ganchos

- Desde 1953 un éxito en todo el mundo.
- No se dan deformaciones permanentes en los ganchos.
- Activación sin problemas.
- Indicado para la fundición con soplete.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wironit	C x 1 Kg	1BE0030	162,00 €

Soldaduras

Soldadura Cr-Co	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld Ø 5mm	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld Ø 0,35mm	Página 16

Wironit Extra Hard

La aleación ideal para colado sobre modelos en trabajos combinados, debido a que el límite elástico es más elevado y la resistencia a la tracción mayor que en Wironit.

- Indicado para la fundición en alta frecuencia



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wironit Extra Hard	C x 1 Kg	1BE0060	162,00 €

Soldaduras

Soldadura Cr-Co	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld Ø 5mm	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld Ø 0,35mm	Página 16

Wironium Hard

Aleación de cromo-cobalto para removibles

- Esta magnífica aleación que desde años viene demostrando su eficacia por todo el mundo seduce por unas particularidades mecánicas extraordinariamente buenas.
- Especialmente apta para la soldadura láser con Wiroweld por el reducido porcentaje de carbono.

Producto	Presentación	Ref	PVP
Wironium Hard	C x 1 Kg	1BE0065	247,00 €



Wironium Extra Hard

Aleación de cromo-cobalto para removibles

- La mejor alternativa cuando es preciso emplear una aleación de mayor resistencia con una dilatación de rotura algo menor.
- Especialmente apta para la soldadura láser con Wiroweld por el reducido porcentaje de carbono.

Producto	Presentación	Ref	PVP
Wironium Extra Hard	C x 1 Kg	1BE0175	247,00 €

Soldaduras

Soldadura Cr-Co	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld Ø 5mm	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld Ø 0,35mm	Página 16

Wironium Plus

La aleación patentada de cromo-cobalto para el colado sobre modelos

- Óptimo para la soldadura láser
 - Aleación universal para trabajos combinados y prótesis con ganchos.
 - Composición modificada y patentada.
 - Mayor límite elástico y resistencia a la tracción.
 - Dilatación de rotura muy elevada.
 - Mayor resistencia a la deformación.
 - Gran estabilidad: activación sin problemas de los ganchos.
 - Biocompatibilidad certificada por institutos independientes.
- (Solo para laboratorios I.W.C.)



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wironium Plus	C x 1 Kg	1BE0190	247,00 €

Soldaduras

Soldadura Cr-Co	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld Ø 5mm	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld Ø 0,35mm	Página 16

■ Aleaciones · Prótesis fija (cerámica)

Wirocer Plus

Aleación cromo-níquel

- Biocompatible
- Sin berilio
- Fácil de trabajar por su moderada dureza
- Su baja conductibilidad térmica asegura una perfecta unión con la cerámica.
- Sin enfriamiento lento.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wirocer Plus	gramo	BE0080	0,37 €

(unidad mínima de compra 100 g)

Soldaduras

Soldadura Wiron	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld NC	Página 16

Wiron Light

Aleación de cromo-níquel para la técnica metalo-cerámica. La temperatura de colado reducida, lo hace especialmente indicado para la fundición con soplete.

- No requiere enfriamiento lento en las cocciones cerámicas
- Óxidos más claros y más fáciles de eliminar en el arenado.
- Con biocertificado



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wiron Light	gramo	1BE0270	0,40 €

(unidad mínima de compra 100 g)

Soldaduras

Soldadura Wiron	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld NC	Página 16

Wiron 99

La aleación de cromo-níquel patentada para la técnica metalo-cerámica y resina, sin berilio.

- Muy resistente a la corrosión: sin potencial citotóxico.
- Biocompatibilidad certificada por institutos independientes.
- Escasa conductibilidad térmica.
- Elevado módulo de elasticidad.
- Alta resistencia en puentes de grandes dimensiones.
- Facilidad de acabado gracias a la escasa dureza de 180 HV10.
- No requiere largo período de enfriamiento: coeficiente de expansión bajo.
- Unión segura de metal y cerámica.
- Gran resistencia al calor: dimensiones estables durante las cocciones y las soldaduras.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wiron 99	gramo	1BE0225	0,43 €

(unidad mínima de compra 100 g)

Soldaduras

Soldadura Wiron	Página 16
Soldadura para láser Wiroweld NC	Página 16

■ Aleaciones · Prótesis fija (cerámica)

Wirobond C

La aleación de cromo – cobalto para la técnica metalo - cerámica, libre de níquel y berilio

- Biocompatible y muy resistente a la corrosión Biocompatibilidad certificada
- Alto modulo de elasticidad
- Gran resistencia a la unión cerámica
- Optimizado para la soldadura por láser



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wirobond C	gramo	1BE0115	0,43 €

(unidad mínima de compra 100 g)

Soldadura Wirobond Página 16
 Soldadura para láser Wiroweld Página 16

Wirobond SG

Aleación cromo-cobalto para metal cerámica

- Biocompatible
- Sin níquel ni berilio
- Alta resistencia al calor y baja conductibilidad térmica
- Económica



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wirobond SG	gramo	1BE0128	0,37 €

(unidad mínima de compra 100 g)

Soldadura Wirobond Página 16
 Soldadura para láser Wiroweld Página 16

Wirobond 280

Aleación "Premium" de cromo-cobalto para metal cerámica

- Biocompatible, sin níquel ni berilio
- Baja dureza
- Optimo coeficiente de expansión térmica. Enfriamiento lento reducido
- Fácil reconocimiento del punto de colado



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wirobond 280	gramo	1BE0134	0,49 €

(unidad mínima de compra 100 g)

Soldadura Wirobond Página 16
 Soldadura para láser Wiroweld Página 16

■ Revestimientos · Prótesis removible

Wirovest

Revestimiento para el colado sobre modelos

- Revestimiento cohesionado con fosfato.
- Con el líquido de mezcla BegoSol alcanza un elevado grado de expansión y dota al modelo de una gran dureza.
- Mezclado con agua (para el vaciado del cilindro) la dureza de Wirovest es mucho menor para el desmoldado.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wirovest	C x 6 Kg (15 bolsas x 400 g)	1BE1057	28,84 €
Wirovest	C x 18 (45 bolsas x 400 g)	1BE1046	72,00 €
Wirovest	C x 18 (4 bolsas x 4,5 Kg)	1BE1048	63,86 €

Líquido mezcla: BegoSol Página 7

Wiroplus N

El revestimiento de precisión para el colado sobre modelos

- Posibilidad de aplicación universal para duplicados de silicona o gelatina y para técnicas especiales.
- Gran precisión de los modelos duplicados, óptima exactitud de ajuste.
- Manipulable durante largo tiempo.
- Superficies de colado extremadamente lisas, endurecimiento con bordes fuertes y fácil desmoldado.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wiroplus N	C x 6 Kg (15 bolsas x 400 g)	1BE1025	32,86 €
Wiroplus N	C x 18 (45 bolsas x 400 g)	1BE1026	82,30 €
Wiroplus N	C x 18 (4 bolsas x 4,5 Kg)	1BE1027	74,06 €

Líquido mezcla: BegoSol Página 7

WiroFine

Revestimiento para todo tipo de aplicaciones en prótesis combinadas y esqueléticos.

WiroFine de BEGO es un revestimiento universal para esqueléticos, con calentamiento rápido o convencional.

Apropiado para duplicados con gelatina o silicona, convence por su fácil y práctica manipulación.

Ventajas:

- Calentamiento rápido o convencional hasta 1050 °C con valores ideales de expansión
- Precalentamiento rápido hasta 1000 °C: Temperatura de introducción en el horno = temperatura final, lo que supone un ahorro de tiempo adicional del 20 - 30 % frente a los materiales de revestimiento convencionales
- Modelos de superficies perfectamente lisas
- Excelente ajuste, bordes de alta resistencia por lo que resulta ideal para prótesis combinadas
- Utilizable con cualquier forma y tamaño de modelos y cilindros



Producto	Presentación	Ref	PVP
WiroFine	C x 6 Kg (15 bolsas x 400 g)	1BE4344	34,92 €
WiroFine	C x 18 (45 bolsas x 400 g)	1BE4345	92,19 €
WiroFine	C x 6 Kg (30 bolsas x 200 g)	1BE4348	51,40 €

Líquido mezcla: BegoSol K Página 7

Wiropaint plus

Revestimiento fino para el colado sobre modelos

- Proporciona una superficie de colado muy lisa y reduce sustancialmente los trabajos de repaso.
- Wiropaint plus apenas sedimenta y está siempre listo para su uso.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wiropaint plus	Frasco x 200 cc.	1BE1100	13,49 €

■ Revestimientos · Prótesis fija

Bellavest T

Revestimiento sin grafito para el colado de precisión para coronas y puentes de metales preciosos o no preciosos

- Exactitud de ajuste
- Fácil desmuflado
- Calentamiento sólo mediante el método convencional.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Bellavest	C x 4,8 Kg (30 bolsas x 160 g)	1BE4201	53,92 €
Bellavest	C x 4,5 Kg (75 bolsas x 60 g)	1BE4209	73,95 €
Bellavest	C x 12,8 Kg (80 bolsas x 160 g)	1BE4202	106,50 €

Líquido mezcla: Begosol Página 7
 Para mayor expansión Begosol HE

BellaStar XL

El nuevo revestimiento de alta calidad para coronas y puentes, que permite un calentamiento rápido o convencional.

Ventajas:

- De grano extremadamente fino, lo que proporciona un ajuste excelente
- Ideal para aleaciones de metales nobles, pero también no nobles
- Excelente comportamiento de desmuflado, superficies de colado extremadamente lisas
- Puede procesarse con o sin aro, con cualquier tamaño de mufla, sin limitación a un determinado sistema
- Precisión en todas las indicaciones, desde el inlay hasta la técnica de implantes, pasando por puentes y coronas dobles.



Producto	Presentación	Ref	PVP
BellaStar XL	C x 4,8 Kg (30 bolsas x 160 g)	1BE4361	68,91 €
BellaStar XL	C x 12,8 Kg (80 bolsas x 160 g)	1BE4361	142,76 €
BellaStar XL	C x 4,5 Kg (75 bolsas x 60 g)	1BE4361	86,62 €

Líquido mezcla: Begosol K Página 7

Bellavest SH

Revestimiento para el colado de precisión de coronas y puentes, en metal precioso, no precioso y cerámicas coladas, que se puede calentar rápido o convencional.

- Bellavest SH cubre todo el espectro de aleaciones dentales (excepto titanio)
- Fácil de trabajar con el líquido especial de mezcla BegoSol HE.
- Tiempo de elaboración largo (5 minutos)
- Superficies de colado extremadamente lisas
- Excelentes resultados en los colados con cerámicas de inyección.

Endurece formando bordes duros pero sin embargo se deja desmuflar fácilmente.

Producto	Presentación	Ref	PVP
Bellavest SH	C x 4,8 Kg (30 bolsas x 160 g)	1BE4247	63,13 €
Bellavest SH	C x 12,8 Kg (80 bolsas x 160 g)	1BE4252	152,54 €
Bellavest SH	C x 4,5 Kg (75 bolsas x 60 g)	1BE4248	85,44 €
Bellavest SH	C x 5 Kg (50 bolsas x 100 g)	1BG0060	84,98 €

Líquido mezcla: Begosol HE Página 7



■ Revestimientos · Varios

Bellatherm

Revestimiento para soldar cohesionado con fosfato

- Estable, no se deshace
- Adecuado para temperaturas de soldadura
- Bellatherm forma bordes especialmente duros, permite un ajuste óptimo y puede separarse del objeto soldado bajo el chorro de agua



Producto	Presentación	Ref	PVP
Bellatherm	Bote x 4,5 Kg	1BE1105	29,46 €

Begoform

Material de muñón refractario para incrustaciones, onlays y facetas de cerámica



Producto	Presentación	Ref	PVP
Begoform	Caja x 1,2kg	1BE2785	43,88 €

BellaCer

Revestimiento especial y económico para cerámica colada

- Especialmente económico, puesto que BellaCer puede emplearse tanto para la técnica de aplicación de porcelana por capas como en la coloración: un revestimiento para dos técnicas.
- Gran variedad de indicaciones: inlays, coronas y puentes
- Consistencia muy fluida, grano muy fino, adaptada a las exigencias especiales de los sistemas de cerámica colada
- La temperatura final de precalentamiento de 850 °C puede ser también la temperatura inicial, aunque se puede calentar de manera convencional
- Desmuflamiento fácil, ahorro de tiempo
- Muy buen ajuste en todas las indicaciones
- Control de expansión exacto con BegoSol K



Producto	Presentación	Ref	PVP
BellaCer	C x 50 bolsas x 100 g	1BE4321	123,50 €

Líquido mezcla: BegoSol K

■ Líquidos de mezcla

- La concentración necesaria en función de la aleación y la aplicación se consigue añadiendo agua destilada o desmineralizada
- Cuanto más alta sea la concentración de BegoSol, HE ó K, mayor es la expansión del revestimiento



BegoSol

Líquido de mezcla para Wiroplus N, Wirovest, Bellavest T y Bellasun

Producto	Presentación	Ref	PVP
BegoSol	Botella 1 litro	1BE1090	13,80 €
BegoSol	Bidón 5 litros	1BE1091	55,77 €

BegoSol HE

Líquido especial de mezcla (sensible a las heladas) para Bellavest SH y Bellavest T

Producto	Presentación	Ref	PVP
BegoSol HE	Botella 1 litro	1BE1095	13,80 €
BegoSol HE	Bidón 5 litros	1BE1096	55,77 €

BegoSol K

Líquido especial de mezcla (sensible a las heladas) para Wirofine, BellaStar XL y Bellacer

Producto	Presentación	Ref	PVP
BegoSol K	Botella 1 litro	1BE1120	14,52 €
BegoSol K	Bidón 5 litros	1BE1121	61,03 €

■ Materiales para el duplicado · Gelatinas

Wirodouble

Gelatina reutilizable.

Características:

- Gran exactitud de moldeado, incluso en los detalles más pequeños
- Reproducción resistente a la rotura
- Elasticidad excelente: incluso los ángulos muertos pueden extraerse del molde de duplicado sin problemas
- Larga duración: si se calienta una vez al día puede utilizarse durante aproximadamente cuatro semanas



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wirodouble	Bidón x 6 Kg.	1BE2050	75,71 €

Castogel

Gelatina reutilizable.

Características:

- Gelatina de duplicado especial para el perfecto colado sobre modelos y los trabajos combinados
- Apta para la técnica de colado con resinas
- Gran exactitud de moldeado, incluso en los detalles más pequeños
- Reproducción resistente a la rotura
- Elasticidad excelente: incluso los ángulos muertos pueden extraerse del molde de duplicado sin problemas
- Larga duración



Producto	Presentación	Ref	PVP
Castogel	Bidón x 6 Kg.	1BE2052	79,52 €

WiroGel M

Nueva gelatina a base de agar-agar para revestimientos, yeso y materiales sintéticos WiroGel M ha sido desarrollado en base a una gelatina de agar-agar de gran tolerancia medioambiental y reducido precio

Ventajas:

- Campos de aplicación: todo tipo de revestimientos fosfatados, yesos Clase IV de buena calidad y múltiples aplicaciones en vertido de materiales sintéticos
- Gran precisión de impresión y superficies perfectamente lisas, capaz de satisfacer los más altos requisitos de precisión
- Termoestabilidad mínima de 30 días ó 15 ciclos de fusión, excelente relación costo/rendimiento



Producto	Presentación	Ref	PVP
WiroGel M	Bidón x 6 Kg.	1BE4351	88,79 €

■ Materiales para el duplicado · Accesorios Gelatina

Mufla kombi

Mufla plástica para el duplicado con gelatina. Dos bases de distinto tamaño para modelos superiores e inferiores. Conformador de bases para los cilindros BEGO

- La escasa conductibilidad térmica garantiza un enfriamiento sin tensiones.
- Dos cuñas incorporadas hacen de protectores de tensión y aseguran la recolocación exacta del molde en la cubeta

Producto	Presentación	Ref	PVP
Mufla kombi	Unidad	1BE2090	51,40 €



■ Materiales para el duplicado · Endurecedores

Durol

Endurecedor por inmersión

Se aplica en frío y penetra muy bien en la superficie de los modelos de duplicado: los hace duros y lisos.

Proporciona un 25 % de ahorro de tiempo y de energía porque bastan 150 °C de precalentamiento



Producto	Presentación	Ref	PVP
Durol	Lata x 1 litro	1BE2111	31,88 €

Durol E

Nuevo líquido endurecedor

- Sin solventes, inocuo, fluido, e inodoro
- Biológicamente seguro, ya que no genera ningún tipo de vapor tóxico
- Se elimina con agua



Producto	Presentación	Ref	PVP
Durol E	1000 ml	1BE2148	31,88 €

Durofluid

Endurecedor en Spray para modelos

Endurece el modelo de duplicado seco y otorga al modelado mayor firmeza



Producto	Presentación	Ref	PVP
Durofluid	1 botella con pulverizador x 100 ml	1BE2008	13,08 €

■ Materiales para el duplicado · Silicona para duplicados

Wirosil

Wirosil es una silicona de dos componentes que reticula por adición y, gracias a la elevada estabilidad de sus dimensiones, reproduce de forma extraordinariamente precisa los modelos maestros

Las cubetas económicas y el dispositivo de estabilidad facilitan un trabajo fácil y seguro con un gasto mínimo de material

Wirosil es ideal para modelar superficies fresadas en los trabajos combinados
Proporción de la mezcla 1:1

Surtido básico con:

- Botella Wirosil 1 x 1 Kg
- Botella Wirosil 2 x 1 Kg
- 1 recipiente mezclador graduado
- 1 espátula
- 1 cubeta de duplicado grande
- 1 cubeta de duplicado pequeña
- 1 botella Aurofilm
- 1 botella Durofluid
- 1 instrucciones



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wirosil	Surtido básico	1BE2000	139,05 €
Reposiciones	Wirosil 2 x 1 kg	1BE2001	74,16 €
Reposiciones	Wirosil 2 x 10 kg	1BE1995	721,00 €

Wirosil sistema de cubetas para duplicado

La reproducción precisa, el ahorro de material, la estabilidad de forma y la fácil utilización caracterizan al sistema de cubetas de duplicado Wirosil



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wirosil	juego cubetas pequeño	1BE2072	30,35 €
Wirosil	juego cubetas grande	1BE2083	33,68 €

Arenas

Perlablast

Material de arenado para brillo

- Compuesto de minúsculas perlas de vidrio al sodio y sin plomo que logran un brillo sedoso y uniforme
- No se producen pérdidas de material porque la superficie es comprimida y no erosionada, y no hay necesidad de retocar las superficies que no se pulen



Producto	Presentación	Ref	PVP
Perlablast 50 µ	8 Kg	1BD6092	46,71 €
Perlablast 125 µ	8Kg	1BD6043	46,71 €
Perlablast 50 µ	20 Kg	1BE4302	87,86 €

Korox

Material de arenado de corindón noble compuesto en un 99,6 % de óxido de aluminio

- Corindón alfa de gran dureza que conserva los cantos vivos hasta el desgaste final
- Korox cumple las normas para la prevención de riesgos laborales



Producto	Presentación	Ref	PVP
Korox 50 µ	Bidón de 8 Kg	1BD6062	43,16 €
Korox 110 µ	Bidón de 8 Kg	1BD6044	43,16 €
Korox 250 µ	Bidón de 8 Kg	1BD6014	43,16 €
Korox 50 µ	Bidón de 20 Kg	1BE4298	94,25 €
Korox 110 µ	Bidón de 20 Kg	1BE4299	94,25 €
Korox 250 µ	Bidón de 20 Kg	1BE4300	94,25 €

Modelado · Prótesis removible

Cera rosa

Lámina de cera de color rosa indicada para:

- Modelar las bases de la prótesis y la silla de resina que sostiene los dientes
- Toma de mordida

Es fácilmente deformable pero durante la prueba es termoestable

Espesor de la lámina 1,5 mm



Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera rosa	C x 500 g	1BD0001	11,54 €
Cera rosa	C x 2500 g	1BD0007	46,04 €

Cera para rellenos

Esta cera se ha desarrollado para rellenar ángulos muertos, colocar escalones de gancho y para rebasar puntos críticos del modelo

Propiedades:

- Puede rasparse y cortarse con facilidad y se adhiere fuertemente al modelo
- Mantiene la forma incluso en remojo
- Temperatura de escaldamiento a partir de 90 °C
- Temperatura de solidificación aprox. 63 °C.
- Color rosa.




Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera para rellenos	Lata x 70 g	1BD0032	17,20 €

Cera preparación

Cera de preparación para la colocación de la silla

- Se adapta bien a los modelos maestros
- Ajuste óptimo
- Para la técnica de prótesis removible
- Color rosa
- Tamaño de la lámina 17,5 x 8 cm

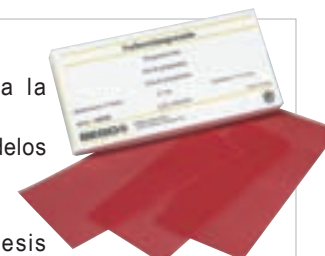

Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera preparación 0,5 mm	Caja x 15 Láminas	1BD0036	14,32 €
Cera preparación 0,6 mm	Caja x 15 Láminas	1BD0037	14,32 €
Cera preparación 0,7 mm	Caja x 15 Láminas	1BD0038	14,32 €

Modelado · Prótesis removable

Cera verde lisa

Cera para colado lisa

- Buena adaptación
- Ajusta fuertemente
- Se quema sin dejar residuos
- Tamaño de la lámina 17,5 x 8 cm
- Color verde

mm	Ref
0,25 mm	1BD0091
0,3 mm	1BD0092
0,4 mm	1BD0093
0,5 mm	1BD0094
0,6 mm	1BD0095
0,8 mm	1BD0096



Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera verde lisa	15 Placas	ver tabla	11,85 €

Perfil de cera

La colocación de los bebederos y sus dimensiones son tan importantes como un modelo preciso y exacto

Esto perfiles son especialmente apropiados para las barras transversales, formas de herradura y bases grandes de removibles

- Fijación fácil y buen adherencia
- Color verde
- Longitud: 17 cm

0,8 mm	30 g	1BD0261
0,9 mm	35 g	1BD0262
1 mm	40 g	1BD0263
1,10 mm	45 g	1BD0281
1,35 mm	50 g	1BD0301
1,2 x 2 mm	50 g	1BD0381
1,6 x 4 mm	75 g	1BD0421
2,0 x 4 mm	85 g	1BD0422
1,15 x 1,75 mm	50 g	1BD0441
2,0 x 6,5 mm	125 g	1BD0461
2 x 4,5 mm	90 g	1BD0462



Producto	Presentación	Ref	PVP
Perfil de cera	Surtido	1BD0250	32,65 €
Perfil de cera	Surtido, Prótesis Removable	1BD0251	32,45 €
Reposiciones	ver tabla	ver tabla	14,94 €

Cera rugosa

Cera de colado para modelar las bases de removibles en el maxilar superior

- Aspecto natural de las bases gracias a la estructura de la cera
- Óptima adaptación y ajuste seguro
- Color verde
- Láminas de 15 x 7,5 cm



Rugosa Gruesa		Rugosa Media		Rugosa fina	
mm	Ref	mm	Ref	mm	Ref
0,35 mm	1BD0160	0,35 mm	1BD0192	0,35 mm	1BD0210
0,40 mm	1BD0170	0,40 mm	1BD0193	0,40 mm	1BD0220
0,50 mm	1BD0180	0,50 mm	1BD0194	0,50 mm	1BD0230
0,60 mm	1BD0190	0,60 mm	1BD0195	0,60 mm	1BD0240

Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera rugosa	15 Láminas	ver tabla	13,91 €

Hilo de cera para bebederos

Fácil de modelar, no se levanta y se quema sin dejar residuos

- Gran seguridad contra deformaciones y estrangulamientos durante la activación
- Fácil conservación
- Semidura, color verde

mm	Ref
2,5 mm	1BD0085
3,0 mm	1BD0086
3,5 mm	1BD0087
4,0 mm	1BD0088
5,0 mm	1BD0089




Producto	Presentación	Ref	PVP
Hilo de cera para bebederos	Rollo x 250 g	ver tabla	17,10 €

Modelado · Prótesis removible

Retenciones de cera

Para reforzar la silla de resina


- Longitud 17 cm

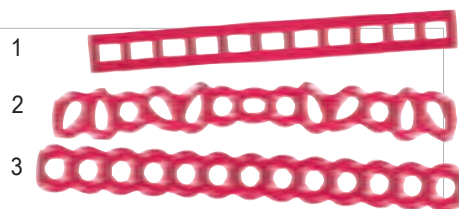

Producto	Presentación	Ref	PVP
1 - Retenciones escalerilla de cera	Caja x 15 unidades	1BD0040	11,74 €
1 - Retenciones escalerilla de cera	Caja x 150 unidades	1BD0050	98,98 €
2 - Retenciones perforadas de cera	Caja x 15 unidades	1BD0620	13,29 €
2 - Retenciones perforadas de cera	Caja x 150 unidades	1BD0630	116,49 €
3 - Retenciones con perforación circular de cera	Caja x 15 unidades	1BD0052	98,16 €
3 - Retenciones con perforación circular de cera	Caja x 150 unidades	1BD0051	12,88 €

Retención de cera en forma de malla

Retenciones de cera en forma de malla Para una configuración fácil y rápida de retenciones.

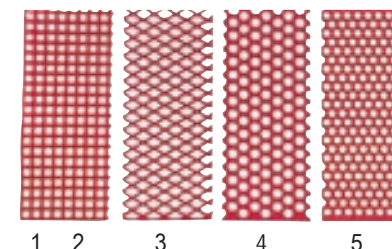

Producto	Presentación	Ref	PVP
1 - Medidas 60 x 42 mm	Caja x 25 unidades	1BD0060	27,19 €
2 - Medidas 75 x 150 mm	Caja x 10 unidades	1BD0061	35,23 €
3 - Medidas 100 x 100 mm	Caja x 10 unidades	1BD0062	35,23 €
4 - Medidas 70 x 70	Caja x 20 unidades	1BD0066	27,71 €
5 - Medidas 70 x 70	Caja x 20 unidades	1BD0039	33,06 €

Perfil de gancho de cera para molares y premolares

La sección transversal en forma de media gota evita la fijación de residuos alimenticios en los molares y premolares y refuerza la estabilidad en toda la extensión del gancho

- El gancho es delgado en su trayecto.
- Muy buena aceptación por parte de los pacientes




Producto	Presentación	Ref	PVP
Perfil de gancho de cera para molares y premolares	Caja de 10 planchas	1BD0020	23,90 €

(280 ganchos sueltos, color verde)

Preformas de cera para ganchos

Estos perfiles de gancho preformados facilitan el modelado y ayudan a ahorrar tiempo

- La configuración de los perfiles permite una gran variedad mediante el recorte de la forma de cera.
- Color verde

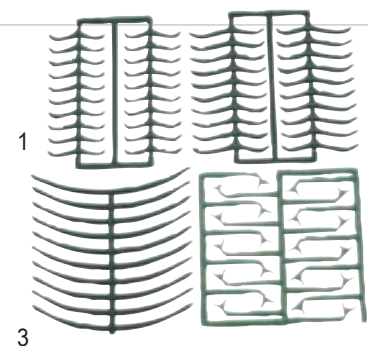

Producto	Presentación	Ref	PVP
1 - Para premolares	Caja x 10 planchas (200 ganchos sueltos)	1BD0021	15,55 €
2 - Para molares	Caja x 10 planchas (200 ganchos sueltos)	1BD0022	15,55 €
3 - Para ganchos anulares	Caja x 10 planchas (200 ganchos sueltos)	1BD0023	15,55 €
4 - Para ganchos Bobbyhard	Caja x 10 planchas (200 ganchos sueltos)	1BD0024	15,55 €

■ Modelado · Prótesis fija

Cera de inmersión

Para la elaboración de copias de cera para la técnica de coronas y puentes

- Color verde



Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera de inmersión	Caja x 150 g	1BD0009	16,15 €

Taco cera azul modelar

Cera natural muy agradable de manipular



Producto	Presentación	Ref	PVP
Taco cera azul modelar	Taco x 100 g	1BD0070	16,07 €

Cera roja cervical

Cera especial para modelar los bordes cervicales de coronas, piezas de precisión e Inlays

- Sin tensiones, fluidez fácil



Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera roja cervical	Lata x 70 g	1BD0112	9,89 €

Cera azul para coronas

Cera de gran calidad para modelar en la técnica de coronas y puentes

- Características ideales para el raspado
- Endurecimiento rápido tras su aplicación y modelado fácil



Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera azul para coronas	Lata x 70 g	1BD0111	9,89 €

Cera Oclusal gris

Ideal para un modelado racional y estético de superficies masticatorias

- Fácil aplicación de la cera opaca
- Los contornos se dibujan ya nitidamente en estado de calentamiento.
- Estas ceras no se colorean ni se pegan
- Se queman sin dejar residuos.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera Oclusal gris	Lata x 70 g	1BD0114	24,72 €

Modelado · Prótesis fija

Cera para fresados

Cera semi-dura de gran calidad para modelar en la técnica de coronas y puentes

- Fáciles de usar en el fresado, pero también se pueden raspar
- No mancha y es muy estable a la forma
- Es la cera ideal para trabajos de fresado
- Color verde



Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera para fresados	Lata x 70 g	1BD0113	12,48 €

Aurofilm

Efectivo agente de preparación para el vaciado. Retira el efecto hidrófugo del modelado y hace posible obtener superficies lisas de colado

- Esto es válido no sólo para la técnica de coronas y puentes sino también para removibles



Producto	Presentación	Ref	PVP
Aurofilm	Botella con pulverizador x 100 ml (para rellenar)	1BE2019	10,20 €
Aurofilm	1 Litro	1BE2015	33,06 €

Isocera

Líquido aislante para la técnica de coronas y puentes

- Aísla muy bien el yeso de la cera y el metal
- Resulta especialmente adecuada para el aislamiento de los muñones si se fabrican pequeños casquillos de cera por el sistema de inmersión



Producto	Presentación	Ref	PVP
Isocera	Frasco x 200 ml	1BE2705	27,02 €


Hilo de cera para bebederos

Ver pág. 11

Sticks plásticos para bebederos

Estabilizan el modelado de cera

- Pueden trabajarse muy bien sobre la llama y se queman sin dejar residuos
- Longitud 16,5 cm

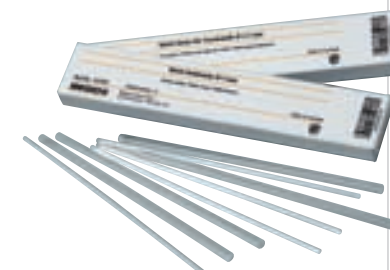

Producto	Presentación	Ref	PVP
Sticks plásticos para bebederos	C x 40 piezas Ø 2,5 mm macizo	1BE2590	16,79 €
Sticks plásticos para bebederos	C x 12 piezas Ø 5 mm hueco	1BE2595	16,69 €

Modelado · Prótesis fija

Bellaform

Piezas intermedias preformadas

- Ahorro de tiempo
- Estratificación uniforme de la cerámica debido a su diseño, análogo a una reducción uniforme del diente natural
- Colados sin residuos: 100% cera
- Ajustable a cualquier situación individual
- Estables por la dureza de la cera y el espacio para conectores reforzados (aleaciones alto contenido en oro)



Producto	Presentación	Ref	PVP
Bellaform	Surtido básico (300 unidades-15 formas)	1BE4080	226,60 €
Reposiciones	C x 50	1BE4081-95	45,94 €
Reposiciones	Cera fijación 45 g	1BE4096	45,94 €
Reposiciones	Cera modelar 45 g	1BE4097	45,94 €

Rapid Wax colado directo / indirecto

Ahorro de tiempo frente a la técnica de colocación de bebederos individuales

- Compatible con el sistema Rapid Ringless
- Posición y dimensiones seguras
- Transiciones de los bebederos seguras
- La cera de modelar se quema sin dejar residuos



Producto	Presentación	Ref	PVP
Bebedero con reserva Ø 2 mm	250 unidades	1BD0654	33,89 €
Bebedero con reserva Ø 2,5 mm	250 unidades	1BD0655	33,89 €
Bebedero con reserva Ø 3,2 mm	250 unidades	1BD0656	33,89 €
Botón cera	C x 100	1BD0657	13,49 €

Producto	Presentación	Ref	PVP
Bebedero con barra de distribución 4 mm	250 unidades	1BD0651	57,15 €
Bebedero con barra de distribución 4 mm	100 unidades	1BD0650	28,52 €
Bebedero con barra de distribución 5 mm	250 unidades	1BD0653	57,15 €
Bebedero con barra de distribución 5 mm	100 unidades	1BD0652	28,52 €

Adapta

Sistema para formar coronas

Permite una embutición fácil y rápida de los casquillos de las coronas.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Adapta Intro	Kit	1BB0520	51,40 €

Contenido: Masilla, Pinzas portaobleas, Obleas 0,6 (50 unidades), Obleas espaciadoras 1 mm rojas (20 unidades), Obleas presentadas en tubo plástico transparente

Producto	Presentación	Ref	PVP
Adapta completo	Kit	1BB0500	102,28 €

Contenido: Masilla, Pinzas portaobleas, Obleas 0,6 (100 unidades), Obleas espaciadoras 1 mm rojas (200 unidades), Obleas espaciadoras 1mm Transp. (200 unid) (Obleas presentadas en dispensador)

Producto	Presentación	Ref	PVP
Obleas transparente 0,1	200 unidades	1BB0517	18,64 €
Obleas rojas 0,1	200 unidades	1BB0502	18,64 €
Obleas transparente 0,6	100 unidades	1BB0501	13,91 €

Alambres

Wironit

Alambre de acero fino para el empleo de resinas y para regulaciones



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wironit	ver tabla	ver tabla	17,92 €

mm	m	Ref
0,6 mm	40 m	1BD8220
0,7 mm	30 m	1BD8250
0,8 mm	20 m	1BD8280
0,9 mm	10 m	1BD8310
1,0 mm	10 m	1BD8340
0,65 x 1,35 mm	10 m	1BD8430
0,75 x 1,50 mm	10 m	1BD8460

Soldaduras

Soldaduras para metal cerámica

Soldadura Wiron

Varillas para soldar utilizables con todas las aleaciones de cromo-níquel de Bego

- Intervalo de fusión: 1020 - 1150 °C
- Temperatura de trabajo: 1165 °C
- Fundente: Fluxsol

Producto	Presentación	Ref	PVP
Soldadura Wiron	1 sobre x 5 g	1BE2625	30,80 €

(6 varillas redondas)

Soldadura Wirobond

Varillas para soldar utilizables con todas las aleaciones de cromo-cobalto para cerámica Wirobond.

- Intervalo de fusión: 1100-1150 °C
- Temperatura de trabajo: 1180 °C
- Fundente: Fluxsol

Producto	Presentación	Ref	PVP
Soldadura Wirobond	1 sobre x 5 g	1BE2622	30,80 €

(8 varillas triangulares)

Soldaduras para Láser

Soldadura Wiroweld NC

Hilo de soldadura de 0,35 mm para soldaduras Láser de cromo-níquel para prótesis fija

Producto	Presentación	Ref	PVP
Soldadura Wiroweld NC	1 rollo x 5,5 m	1BE0006	78,38 €

Soldadura Wiroweld

Hilo para soldaduras Láser de cromo-cobalto para el colado sobre modelos y para todas las aleaciones Bego Wirobond para prótesis fija.

Producto	Presentación	Ref	PVP
Soldadura Wiroweld	0,50 mm 1 rollo x 1,5 m	1BE0005	63,45 €
Soldadura Wiroweld	0,35 mm 1 rollo x 2 m	1BE0003	90,85 €

Soldaduras para prótesis removibles

Soldadura cromo - cobalto

Varillas para soldar utilizables con todas las aleaciones de cromo-cobalto para el colado sobre modelos

- Intervalo de fusión: 1100-1150 °C
- Temperatura de trabajo: 1180 °C
- Fundente: Fluxsol

Producto	Presentación	Ref	PVP
Soldadura cromo - cobalto	1 sobre x 5 g	1BE2520	20,50 €

(5 varillas semiredondas)



■ Soldaduras · Fundentes

Minoxyd

Fundente para soldar aleaciones de metales preciosos, así como metales preciosos

con cromo-cobalto o cromo-níquel

- Evita soldaduras intermedias y proporciona uniones fijas y resistentes
- Minoxyd se emplea también para soldar aleaciones de colado en el horno después de cocer la cerámica



Producto	Presentación	Ref	PVP
Minoxyd	Frasco x 80 g	1BE2530	19,98 €

Fluxol

Fundente

- Preparación inmediata para soldar metales preciosos y aleaciones sin metales preciosos



Producto	Presentación	Ref	PVP
Fluxol	Frasco x 80 g	1BE2531	28,63 €

■ Soldaduras · Varios

Thermostop

Pasta de protección antitérmica

- Sin amianto, para cubrir la base de resina cuando hay que soldar en un punto muy cercano
- En casos de trabajos de soldadura difíciles, tampoco es necesario quitar las secciones de resina



Producto	Presentación	Ref	PVP
Thermostop	Bote x 140 g	1BE2540	18,44 €

Varios

Formador de cilindro

Usando la cubeta de duplicado BEGO no es necesario fijar con cera los modelos de revestimiento ni rectificarlos

- Este formador de cilindro puede ser utilizado con los demás sistemas de duplicado



Producto	Presentación	Ref	PVP
Formador de cilindro Color rojo, pequeños	4 unidades	1BE2390	37,29 €
Formador de cilindro Color azul, grandes	4 unidades	1BE2400	42,13 €

Formadores de embudo

Formador de embudo para el colado sobre modelos

- Para la confección del embudo en la base del modelo de revestimiento.
- Fácil y precisa inyección de la gelatina



Producto	Presentación	Ref	PVP
Formadores de embudo	C x 10 unidades	1BE2060	49,54 €

Formadores de embudo

Formador de embudo plástico para el colado sobre modelos

- Se adapta a todos los sistemas de colado



Producto	Presentación	Ref	PVP
Formadores de embudo	C x 100 unidades	1BE2068	22,76 €

Sistema Rapid Ringless

Formador de cilindro para prótesis fija

- Ahorro de tiempo frente a sistemas de cilindros con manguito de lámina, anillo de hierro, etc
- Compatible con el sistema Rapid Wax
- Ahorro de coste por su reducido desgaste en comparación con sistemas similares
- Fácil separación del cilindro y anillo
- Indicado para todos los revestimientos Bego para coronas y puentes



Producto	Presentación	Ref	PVP
Sistema Rapid Ringless	Unidad	ver tabla	23,38 €

mm	Ref
nº1 / 37 mm	1BE2665
nº3 / 55 mm	1BE2666
nº6 / 72 mm	1BE2667

Varios

Bego Press

Formador de cilindro para cerámica colada

- Fácil de limpiar
- Anillo de silicona de larga duración
- Apto para todos los materiales de revestimiento en sistemas de cerámica colada



Presentación: base de mufla, anillo de silicona, tapa de mufla

Producto	Presentación	Ref	PVP
Bego Press para mufla 100 g	ver tabla	1BE2668	53,66 €
Bego Press para mufla 200 g	ver tabla	1BE2669	57,78 €

Tiras de Kaolín para cilindros

La tira Kaolín para cilindros BEGO no contiene amianto. Se queman sin dejar residuos y proporciona espacio al revestimiento que se expande



Producto	Presentación	Ref	PVP
Tiras de Kaolín para cilindros 40 mm ancho	3 rollos x 30 m	1BE2409	44,81 €
Tiras de Kaolín para cilindros 45 mm ancho	3 rollos x 30 m	1BE2408	47,90 €

BegoStone plus

El yeso superduro Clase 4 es un yeso natural que se fabrica con una gran constancia de composición entre los diferentes lotes, garantizando así una constante reproducción de los resultados

BegoStone plus se caracteriza por su gran precisión de reproducción y sus excelentes características de fluidez.

Propiedades:

- Gracias a sus características tixotrópicas se puede aplicar de inmediato y posee una fluidez extraordinaria ya bajo vibraciones mínimas
- Excelente precisión de reproducción con todos los materiales de impresión habituales
- Elevada resistencia a la flexotracción lo que permite una gran resistencia a la rotura de dientes y muñones
- Su elevada dureza lo hace resistente al desgaste
- Expansión lineal ideal del 0,09 %
- Tiempo de elaboración optimizado, aprox. 5 minutos
- Su color ideal, marfil 35, permite distinguir con gran claridad los detalles y los límites de preparación



Producto	Presentación	Ref	PVP
BegoStone plus	4,5 Kg	1BE6045	51,91 €
BegoStone plus	18 Kg	1BE6046	121,75 €

Varios

Wirolyt

- Líquido para el brillo electrolítico de aleaciones de cromo-cobalto.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Wirolyt	1 litro	1BE2460	24,10 €
Wirolyt	2,5 litros	1BE2462	51,71 €

Steribim Super

- Pasta pómez para prótesis de resina con efecto antiséptico
- Sin formaldehído, biodegradable y atóxico
- Bueno para la piel, no tiene ningún olor desagradable
- Sin cuarzo, sin riesgo de silicosis
- Alta potencia de pulido hasta el último gramo, baja rugosidad residual
- Consistencia cremosa
- Efecto antiséptico probado a nivel científico



Producto	Presentación	Ref	PVP
Steribim Super	Bidón x 1 Kg	1BE4284	14,32 €
Steribim Super	Bidón x 10 Kg	1BE4283	50,88 €

Bego Clip

Anclaje extracoronario

Indicaciones:

- Prótesis parciales y extracoronarias


Dimensiones:

- Altura: 4mm (altura con hembra: 4,2 mm)
- Diámetro cabezal: 2 mm

Producto	Presentación	Ref	PVP
Bego Clip	surtido básico	1BE2559	126,69 €
Reposiciones machos	C x 6	1BE2558	131,10 €
Reposiciones matriz amarilla	C x 12	1BE2566	96,00 €
Reposiciones matriz naranja	C x 12	1BE2567	96,00 €
Reposiciones matriz azul	C x 12	1BE2568	96,00 €
Reposiciones matriz duplicar	C x 12	1BE2565	81,47 €

Contenido:

2 machos acrílicos blancos, 2 casquillos macho, 2 hembras duplicado marrones acrílicas, 2 casquillos para toma de impresión azul teflón, 2 pins modelos gris acrílicos, 2 hembras teflón amarillas fuerza extracción baja, 2 hembras teflón naranja fuerza extracción normal, 2 hembras teflón azul fuerza extracción alta, 1 pivote para inserto azul acrílico, 2 instrumentos fijación negros

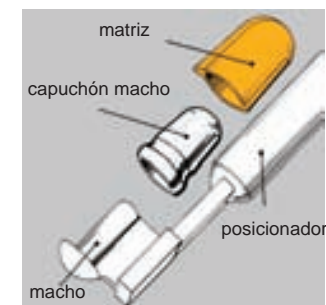

■ Maquinaria · Arenadoras

Korostar plus

Arenadora manual con módulo de filtros de alta potencia integrado. Arenado de revestimiento para coronas y puenes y para el colado sobre modelos

- Diseño ergonómico: posición de trabajo cómoda, gran libertad de movimiento manual
- Carcasa metálica muy robusta, superficie de apoyo pequeña
- Fiable incluso en las condiciones más rigurosas
- La boquilla de inyección integrada en el sistema de alimentación garantiza una óptima proporción de material de arenado en el chorro de aire del sistema de circulación
- Compuerta de carga de gran tamaño y cámara de arenado bien iluminada gracias a linterna de larga duración protegida contra el polvo
- Gran capacidad de aspiración gracias al módulo de filtros integrado, equipado con un sistema de 4 filtros
- Filtro previo de gran capacidad: entre 1,5 y 5 kg en función del tipo de polvo



Producto	Presentación	Ref	PVP
Korostar plus	Unidad	1BB6123	3.007 €

Incluye módulo de filtros, y 1 mirilla adicional, 1 junta para la mirilla, 1 tapón de goma, 5 filtros de papel y 4 fusibles.

Protempomatic plus

Arenadora totalmente automática con módulo de filtros integrado de alta potencia. Rápido y racional

- Tecnología sólida, diseño ergonómico
- Posición de trabajo cómoda gracias al biselado lateral de la carcasa
- Gran libertad de movimiento manual gracias a grandes orificios de acceso
- Perfecta visibilidad del objeto gracias al aventador del material de arenado
- Proporción óptima del material de arenado en el chorro
- Posibilidad de arenar automáticamente hasta 6 modelos de colado simultáneos en 15 - 20 minutos
- Tiempo de arenado regulable entre 1 y 60 minutos
- Compuerta de carga con sistema de seguridad por conmutadores magnéticos: al abrirse la compuerta se interrumpe el arenado
- Buena iluminación de la cámara de arenado gracias a linterna de larga duración protegida contra el polvo



Producto	Presentación	Ref	PVP
Protempomatic plus	Unidad	1BB6113	5.002 €

Incluye módulo de filtros, 1 mirilla adicional, 1 junta para la mirilla, 1 tapón de goma, 1 guante, 5 filtros de papel y 4 fusibles.

Duostar 2 plus con aspiración

Duostar Z2 sin aspiración

Arenadora combinada con dos lapiceros de arenado fino para conectar a un sistema de aspiración centralizada.

Posición de trabajo cómoda, gran libertad de movimiento manual gracias al biselado lateral de la carcasa y los grandes orificios de acceso

- Gran utilidad práctica, ya que puede emplearse como arenadora de circulación y como aparato de arenado fino
- Dimensiones reducidas para un aparato que integra dos técnicas de arenado. Fácil de manejar mediante un pedal
- Dos lapiceros de arenado fino para trabajos de precisión, el material de arenado sólo se utiliza una vez
- Dos modos de funcionamiento para utilizar el material de arenado una sola vez o pasar por un sistema de circulación
- Gracias a las boquillas intercambiables, los lapiceros pueden utilizarse con materiales de arenado de distinta granulometría
- Óptima protección contra el polvo gracias al módulo de filtros integrado, equipado con un sistema de 4 filtros

La arenadora ideal para laboratorios pequeños y medianos



Producto	Presentación	Ref	PVP
Duostar 2 plus	Unidad	1BB6118	4.217 €
Duostar Z2	Unidad	1BB6115	3.016 €

■ Maquinaria · Arenadoras

EasyBlast

Arenadora para el arenado fino:

Simple, versátil y económica

- Tecnología sofisticada de alta fiabilidad gracias a la utilización exclusiva de componentes neumáticos resistentes al desgaste
- Dos depósitos para material de arenado con un dispositivo de dosificación acreditado
- Boquillas robustas para el arenado con toberas intercambiables para diferentes tamaños de grano
- Mirilla irrompible con retención para un recambio fácil, buena iluminación de la cámara gracias a una lámpara cilíndrica
- Conectable a aspiraciones centrales o puestos unitarios
- Trabajo sin cansancio gracias a la concepción ergonómica de la carcasa



Producto	Presentación	Ref	PVP
EasyBlast	Unidad	1BB6080	1.506 €

2 depósitos de material de arenado y toberas intercambiables para diferentes tamaños de grano, primer relleno de material de arenado, patrón para el recorte de la mirilla.

Starlet

Módulo de arenado de precisión

- Starlet se utiliza para la limpieza, grabado y brillo de las estructuras de metal y cerámica, así como muchas otras aplicaciones técnicas dentales
- Es un módulo económico que constituye un complemento útil en caso de poseer arenadora con corindón de dos orificios para las manos; también se puede utilizar en cámaras de arenado
- El material de arenado es de un solo uso
- Cambiando la boquilla, Starlet puede trabajar con los diferentes materiales de arenado de BEGO.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Starlet	Unidad	1BB5910	492 €

Con interruptor de pie y lapicero de arenado fino Ø 1,2 mm para granos de 110-250 µm

■ MAQUINARIA · Mezcladoras

Motova 100

Mezcladora al vacío de revestimientos, siliconas y yeso

- Tiempo de mezcla controlado por temporizador electrónico, ajustado en continuo hasta 255 seg.
- Fácil manejo
- Sistema rápido de acoplamiento del tazón
- Tazones de mezcla disponibles desde 250 hasta 1200 ml. (4 tamaños)
- Diseño de sobremesa o pared
- Excelente relación calidad / precio



Producto	Presentación	Ref	PVP
Motova 100	Unidad	1BB6280	1.551 €

Motova 300

Mezcladora al vacío de revestimientos, siliconas y yeso

- Tiempo de mezcla controlado por temporizador electrónico, ajustado en continuo hasta 255 seg.
- Preprogramada con parámetros individualizados para distintas masas de revestimientos (revoluciones, cambio de sentido de rotación, tiempo de mezcla, nivel y tiempo de vacío)
- Fácil manejo
- Sistema rápido de acoplamiento del tazón
- Tazones de mezcla disponibles desde 250 hasta 1200 ml. (4 tamaños)
- Diseño de sobremesa o pared



Producto	Presentación	Ref	PVP
Motova 300	Unidad	1BB6270	2.792 €

■ MAQUINARIA · Gelatinadoras

Gelovit 200

Aparato de duplicado universal con nueva tecnología y atractivo diseño. Las características esenciales de Gelovit 200 son su potente motor de accionamiento y un sistema de control electrónico especialmente adaptado a las necesidades de un laboratorio dental.

Prestaciones más destacables:

- La totalidad del proceso es controlado por un software desarrollado específicamente para la práctica diaria de un protésico dental.
- Una memoria EPROM permite almacenar los parámetros óptimos para la regulación de temperatura de trabajo y ciclo de fusión
- La programación del momento de preparación resulta extremadamente sencilla. El tiempo de fusión es de 4 horas; una vez transcurrido el mismo, la gelatina estará lista para su utilización
- Su pantalla funcional permite garantizar la calidad del proceso al ofrecer una clara información sobre todos los parámetros importantes
- Fusión de la gelatina programable: sus sensores de gran precisión permiten controlar perfectamente todos los parámetros de temperatura
- El número de ciclos de fusión puede definirse de manera individual, garantizando así una calidad constante en los resultados
- Una tercera fase de temperatura de breve duración con temperatura de trabajo reducida permite obtener un ajuste óptimo
- Nuevo diseño de la carcasa con elementos funcionales adicionales, tales como la nueva pantalla digital de posición ergonómica



Producto	Presentación	Ref	PVP
Gelovit 200	Unidad	1BB6175	3.637 €

■ MAQUINARIA · Baños Electrolíticos

Eltropol 300

El baño electrolítico inteligente

- Calcula automáticamente la duración de la electrólisis en función del tamaño de las piezas.
- Un nuevo sistema de calentamiento permite alcanzar rápidamente la temperatura de trabajo.
- Permite pulir 2 unidades simultáneamente
- Indicador para el cambio de líquido y sistema de evacuación del líquido gastado
- Cátodo suplementario para conseguir óptimos resultados en esqueléticos con paladares acentuados.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Eltropol 300	Unidad	1BB6310	2.690 €

Eltropol E

Aparato electrolítico para una pieza de colado sobre modelo

- Rápido, seguro, muy fiable y económico
- Desconexión rápida en caso de cortocircuito
- Regulación automática de la intensidad de corriente con potenciómetro en continuo
- Gran seguridad gracias al contacto fijo de las pinzas con el objeto
- Trabajo rápido: duración del proceso de brillo de sólo 6-8 minutos



Producto	Presentación	Ref	PVP
Eltropol E	Unidad	1BB5895	1.502 €

■ MAQUINARIA · Hornos de precalentamiento

Miditherm 100 MP

Horno de precalentamiento controlado por microprocesador, con pantalla digital, para coronas, puentes y colado sobre modelos

- Temperatura máxima de calentamiento de aprox. 1.100 °C
- Máximo llenado del recinto: 12 cilindros para coronas y puentes de 180 g cada una ó 9 cilindros para removibles de 250 g
- Programables hasta 9 programas individuales
- Con hasta 4 niveles de parada de temperatura
- Velocidad de calentamiento programable, temperatura lineal de 1 a 9 °C/minuto
- Posibilidad de introducción del momento de colado; el final de programa es indicado con señales ópticas y acústicas
- Carcasa de acero fino resistente a la corrosión
- Tubos de empalme y temporizador para la aspiración Regulus, la temperatura de desconexión se puede ajustar en cualquier programa grabado



Producto	Presentación	Ref	PVP
Miditherm 100 MP	Unidad	1BB6150	3.450 €

Miditherm 200 MP

Horno de precalentamiento controlado por microprocesador con pantalla digital para coronas, puentes y colado sobre modelos.

- Temperatura máxima de calentamiento de aprox. 1.100 °C
- Máximo llenado del recinto: hasta 32 cilindros para coronas y puentes de 180 g cada una ó 9 cilindros de 520 g para removibles
- Programables hasta 9 programas individuales, con hasta 4 niveles de parada de temperatura
- Velocidad de calentamiento programable, temperatura lineal de 1 a 9 °C/minuto
- Posibilidad de introducción del momento de colado; el final de programa es indicado con señales ópticas y acústicas
- Tubos de empalme y temporizador para la aspiración Regulus, la temperatura de desconexión se puede ajustar en cualquier programa grabado



Producto	Presentación	Ref	PVP
Miditherm 200 MP	Unidad	1BB6155	4.809 €

Maquinaria · Máquinas de colado en alta frecuencia

Nautilus CC Plus

Máquina para colar por inducción en alta frecuencia, por vacío y presión, totalmente automática

- Con Nauticard, permite transferir los datos del colado, entre la Nautilus y su PC
- Hasta 640 protocolos de fundición
- Permite enviar hasta 10 protocolos de diagnóstico a Bego Service
- Incluye Software Bego Cast Control, para determinar parámetros de fundición de aleaciones ajenas a Bego
- La integración del sistema en el control numérico de la máquina permite ejecutar el proceso de colado de manera completamente automático
- Puede asimismo iniciar el vertido en modo manual al disponer de visualización de la temperatura del metal fundido; una ventana permite controlar visualmente la totalidad del proceso
- Colado de aleaciones delicadas de metales nobles en crisol de grafito con temperatura controlada, bien en modo manual o automático
- Visualización de temperaturas teórica y real durante la totalidad del proceso de fusión



Producto	Presentación	Ref	PVP
Nautilus CC Plus	Unidad	1BB6220	24.378,00 €
Impresora p/Nautilus CC Plus	Unidad	1BA6267	360,50 €
Acumulador de aire comprimido	Unidad	1BA6260	670,00 €

Nautilus T

La máquina compacta de colado por inyección al vacío con dispositivo de fusión de alta frecuencia

- Probada tecnología del colado por inyección al vacío de BEGO con dispositivo moderno de fusión de alta frecuencia
- Técnica del crisol de elevación para un flujo seguro de la aleación
- Manejo simple y muy buena accesibilidad gracias a la técnica de compuertas manteniendo dimensiones muy reducidas
- Determinación del momento del colado a través de un indicador de tiempo
- Display gráfico multifuncional que apoya el manejo simple
- Ahorro muy económico de las aleaciones, fundición rápida y adaptada al material hasta 1.550°C



Producto	Presentación	Ref	PVP
Nautilus T	Unidad 230 V, 50/60 Hz	1BB6240	18.600 €
Acumulador de aire comprimido	Unidad	1BA6260	670 €

Fornax T

La centrífuga compacta para colar en alta frecuencia e inducción

- Centrífuga compacta, en formato de mesa, para el colado por inducción (generador de semiconductores)
- Altas reservas de potencia con un consumo de corriente de sólo 16 amperios, temperatura de colado de hasta 1.550°C: ideal para todas las aleaciones dentales (excepto titanio)
- Refrigeración por circuito cerrado de circulación de agua para refrigeración BEGO o con conexión directa a la red de entrada y de evacuación de agua
- Interruptor de calentamiento escalonado para crisoles de cerámica o de grafito
- Tiempo de calentamiento corto por infrarrojo
- Ajuste más rápido a cilindros de distintos tamaños mediante un mecanismo de ajuste de nuevo diseño
- Dispositivo para la tara fácil para cilindros de distinto peso



Producto	Presentación	Ref	PVP
Fornax T	Unidad 230 V, 50/60 Hz	1BB6140	9.900 €

Circuito refrigerante Térmico

Para Nautilus T/CC y Formax T

Producto	Presentación	Ref	PVP
Circuito refrigerante	Unidad	1BB6230	1.190 €

Maquinaria · Máquinas de colado en alta frecuencia

Crisoles

Para Fornax

Producto	Presentación	Ref	PVP
Crisol Cerámico 90 g	C x 6	1BE2482	101,15 €
Inserto de grafito	C x 6	1BE2454	101,15 €
Inserto Cerámico	C x 3	1BE2455	101,15 €
Inserto Cristal Carbono	C x 4	1BE2473	152,65 €

Para Nautilus

Producto	Presentación	Ref	PVP
Crisol Cerámico	C x 4	1BE2488	150,48 €
Inserto de grafito	C x 6	1BE2468	97,03 €
Asas acrílicas	C x 2	1BE2436	28,43 €
Asas Cerámicas	C x 2	1BE2467	27,35 €
Inserto Cristal Carbono	C x 4	1BE2473	152,65 €

Lolipot Spray

Spray para aplicar a los crisoles cerámicos Bego

- Aumenta la vida útil del crisol
- Reduce los óxidos
- Reduce los residuos de fundición
- Facilita la fluidez en el colado



Producto	Presentación	Ref	PVP
Lolipot Spray	100ml	1BE2477	37,29 €

Maquinaria · Soldadora Láser

LaserStar PW

El nuevo LaserStar PW (power welding), capaz de desarrollar 85 julios de potencia, equipado para poder realizar todas las soldaduras utilizadas en laboratorios dentales Convence no sólo por su potencia, sino también por su diseño, ergonomía y funciones adicionales que lo convierten en el primero de su clase

Prestaciones más destacables:

- Evolución natural del contrastado modelo LaserStar LYNX con innovadoras funciones adicionales
- Power welding: 85 Julios, la máxima potencia
- Su función de modulación de impulsos permite obtener soldaduras de calidad uniforme en procesos estandarizados y específicos para los distintos materiales
- Foco de tamaño libremente graduable, adaptable a cualquier condicionante técnico
- LYNX-Dynascope, sistema estereooptico alternativo que permite una gran libertad de posicionamiento radial y axial de la cabeza evitando así la aparición de cansancio en trabajos de larga duración
- Diseño inconfundible y de gran ergonomía que aumenta la comodidad de servicio
- Control optimizado de alimentación de gas protector; su sólida y flexible boquilla de gas protector evita la formación de óxido en el punto de soldadura
- Espacio interior de gran amplitud
- Incorpora estereomicroscopio Leica y apoya manos



Producto	Presentación	Ref	PVP
Laser Star PW Leica	Unidad	1BB6180	45.991 €
Laser Star PW con display	Unidad	1BB6185	46.511 €
Laser Star PW Lynx	Unidad	1BB6190	47.996 €

Maquinaria · Soldadora Láser

LaserStar T Plus

Soldadora Láser Ergonómica

- Potencia máxima 50 julios
- Permite ajustar el diámetro de la soldadura de 0.3 a 2.3 mm
- Incorpora 10 programas con diferentes parámetros de soldadura
- Dispone de 3 palancas de control (joysticks) que permiten una rápida selección de los parámetros del láser según la indicación
- La cámara de soldar está equipada con una salida fija y otra adicional, direccionable, de gas argón
- Compacto y ergonómico



Producto	Presentación	Ref	PVP
LaserStar T Plus	Unidad	1BB6210	33.070 €

Maquinaria · Pistola de vapor

Triton SLA

Vaporizadora seco o húmedo: Ecológico, potente y polifacético

- Aparato de gran potencia que funciona con vapor seco o húmedo
- Toma de agua fija con cartucho de desalinización completo BEGO
- Presión de vapor de aprox. 3 bar para una limpieza suave pero profunda
- Gran seguridad debida a las conexiones fijas con tubos de cobre
- Caja de acero fino y plástico resistente a la corrosión
- La pistola pulverizadora con pulsador permite trabajar cómodamente
- En caso de fugas de agua el detector interrumpe inmediatamente la entrada de agua



Producto	Presentación	Ref	PVP
Triton SLA	Unidad con cartucho desalinizador	1BB6005	3.579 €

Maquinaria · Varios

Paraskop M

Aparato para fresados multifuncional: compacto, preciso y universal

- Fijación magnética de las articulaciones
- El brazo de fresado es un brazo multifuncional
- Palanca para el asentamiento del instrumental
- El control del motor para el fresado está integrado en la base
- Micromotor de hasta 30.000 rev./min. con dispositivo para el cambio rápido de fresas
- Delimitación de la profundidad de taladro con tornillo micrométrico 1/100 mm
- Con posibilidad de conmutación de rotación a la derecha o izquierda
- Ideal para fresar y perforar la cera
- Base de modelado extremadamente sólida y precisa
- Fijación electromagnética de la base para el modelado




Producto	Presentación	Ref	PVP
Paraskop M	Unidad	1BB6060	5.490 €

Aparato básico con husillo para fresar, pinola, base para el modelado y lámpara halógena

Paraflex

Paralelómetro de precisión con mesa removible

- Cojinetes de precisión en todas las articulaciones
- Dos articulaciones horizontales (brazo de doble articulación)
- Superficie de trabajo con doble ajuste vertical
- Zócalo macizo que proporciona una estabilidad de 360°
- Mesa removible de precisión para modelos con retención segura del modelo
- Mesa para modelos y portainstrumentos girable a 360°
- Soporte de sujeción para modelos giratorio con bloqueo de 0°
- Posibilidad de utilizar una segunda mesa de trabajo
- Completo equipamiento básico
- Óptima relación calidad/precio

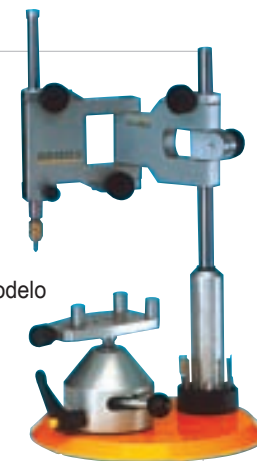

Producto	Presentación	Ref	PVP
Paraflex	Unidad básica	1BB2220	990 €

Con mesa para modelos, pinza de sujeción 2,35 mm, pinza de sujeción 3 mm, kit de instrumentos con juego de medición Sistema-Ney

GARANTIA BEGO

■ **SISTEMA CAD-CAM para estructuras en prótesis fija**

PRODUCCIÓN Y MATERIALES

Metales Láser sinterizados (SLM) - Cromo-cobalto
- Oro-platino

Circonio en 5 tonalidades -BeCe Cad Translucido



ESCÁNER

Escaneado de modelos parciales ó completos, antagonista, registros y dobles escaneados.



SOFTWARE

Auto-localización de margen, coronas y pñnticos de anatomía reducida, barras Dolder y telescópicas.



ASISTENCIA

Servicio de asistencia REMOTA al usuario.
Su instructor le ayudará directamente en su ordenador.



EXCELENTE CALIDAD

Estructuras extremadamente densas de ajustes extraordinarios
Garantía BEGO en todo el proceso.



RÁPIDO Y SENCILLO

Con una formación in-situ, estará capacitado para su uso en menos de un día.



APOYO EDUCACIONAL

En nuestros cursos "MAB Formación 2009" podrá seguir el proceso completo desde el diseño hasta el recubrimiento.



MAB FORMACIÓN

Robusto, flexible, intuitivo.



SPEEDSCAN/3SHAPE

Control y Validación integrado



MAB
LABORATORIO

BIT LINE



BIT DENTAL, S.L. C/ Los Vientos, 13 (La Torreta) - Apartado 401 - Fax 965 380 466 - 03600 ELDA (Alicante)

E-mail: bit@bitdental.com - www.bitdental.com

TELÉFONO GRATUITO

900 11 11 31

PRECIOS SIN I.V.A. BIT DENTAL no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Portes pagados a partir de 90 €. ante de I.V.A.