

CEKA ATTACHMENTS PRECI-LINE

PRECI-HORIX®



PRECI-HORIX

SENCILLA Y VENTAJOSO

El sistema de barras y caballitos PRECI-HORIX, desarrollado por Helmut Hader, es el anclaje de barra más popular gracias a su elaboración fácil y su gran precisión.

Desde hace más de 30 años, PRECI-HORIX convence los odontólogos por la retención precisa de los caballitos de plástico, el fácil mantenimiento y el confort para el paciente.




- Reemplazo fácil y rápido del caballito
- Tres fuerzas de retención a elegir
- La barra perfilada puede ser colada con todas las aleaciones.
- También muy popular sobre implantes
- Soporte directo con rotación
- El "clic" audible del caballito ofrece al paciente una retención segura.



ENVOLTORIO PRECI-HORIX

INCORPORACIÓN FÁCIL DEL CABALLITO

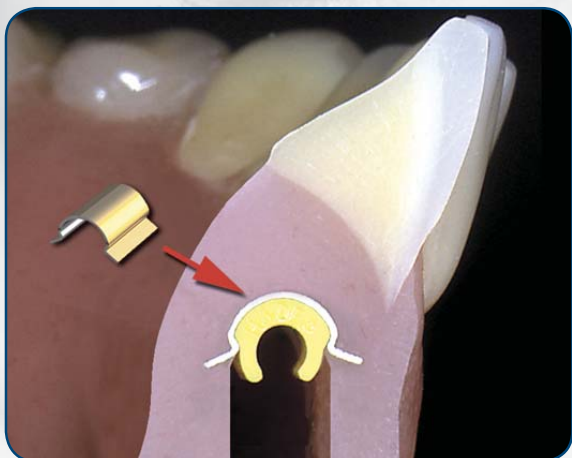




Se recomienda la polimerización del envoltorio en el acrílico para la posición precisa de los caballitos y la incorporación del caballito PRECI-HORIX de plástico con la retención deseada en el envoltorio.


- Blanco: retención reducida
- Amarillo: retención normal
- Rojo: retención fuerte

El perfil de 1,8 mm es también utilizable para los caballitos PRECI-CLIP (véase folleto separado).



ELABORACIÓN SENCILLA

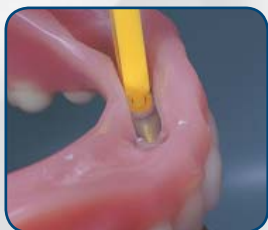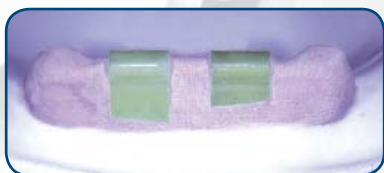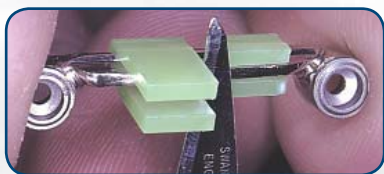

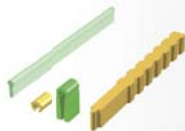


PRECI-HORIX STANDARD

1701

JUEGO

2 barras de plástico
6 caballitos amarillos
6 caballitos de elaboración
1 auxiliar de inserción

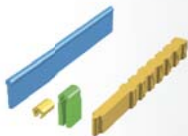

PRECI-HORIX PLASTICWAX

1731

JUEGO

2 barras en PLASTICWAX
6 caballitos amarillos
6 caballitos de elaboración
1 auxiliar de inserción



PRECI-HORIX COMBI

1741

JUEGO

1 barra de plástico
2 caballitos amarillos
2 caballitos de elaboración
2 envoltorios en INOX
1 auxiliar de inserción



CABALLITO PRECI-HORIX

retención normal:

1802 **amarillo** 6 piezas

1802B **amarillo** 50 piezas

retención reducida:

1805 **blanco** 6 piezas

1805B **blanco** 50 piezas

retención fuerte:

1806 **rojo** 6 piezas

1806B **rojo** 50 piezas

envase combinado:

1807 2 + 2 + 2 piezas



ENVOLTORIO PRECI-HORIX

Envoltorio ultra fino en INOX, cubierto con nitrito de titanio, para la posición precisa de los caballitos en la prótesis

1706 6 piezas

1706B 50 piezas



PERFIL PRECI-HORIX

Barra perfilada de plástico calcinable.

Utilizar aleaciones duras.

Largura: 50 mm – Altura: 4 mm – \varnothing 1,8 mm

1704 6 piezas

1704B 50 piezas



PERFIL PRECI-HORIX PLASTICWAX

Ideal para la elaboración con revestimientos rápidos. Utilizar aleaciones duras.

Largura: 50 mm – Altura: 8,25 mm – \varnothing 1,8 mm

1734 6 piezas

1734B 50 piezas

WWW.CEKA-PRECILINE.COM

SWISS MADE

CE 0470

CEKA REVAX
CEKA SOL
PRECI-HORIX
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-BAR
PRECI-BALL
PRECI-CLIP
PRECI-SAGIX
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX EXTRACORONARIO
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-CLIX RADICULAR RC
PRECI-TUBIX/MORTIX
PRECI-POST
PRECI-PROFILE
PERMA-RET
3C-BOND
EXPANDO
CEKA-MAX

PRECI-HORIX®

Prospecto n° 273.S-ed.A
Copyright© ALPHADENT NV 1/2008
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV
Textielstraat 24
8790 Waregem, Bélgica
tel. +32 56 629 100
fax +32 56 629 101
e-mail: info@ceka-preciline.com